

Dosage direct par suivi conductimétrique


Exemple : dosage des ions sulfate dans une eau minérale

Problème

Il s'agit de déterminer la concentration en ions sulfate d'une eau minérale.

Document :

Le mélange d'une solution contenant des ions sulfate SO_4^{2-} et d'une solution contenant des ions baryum Ba^{2+} s'accompagne d'une transformation chimique modélisée par une réaction de précipitation ; l'équation associée s'écrit :

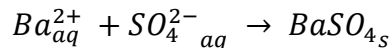

Cette réaction, totale, unique et rapide, peut servir de support à un titrage.

L'ajout d'une solution de chlorure de baryum $Ba^{2+}_{(aq)} + 2 Cl^{-}_{(aq)}$ dans une solution contenant des ions sulfate conduit à la précipitation du sulfate de baryum. Les ions chlorure introduits en même temps que les ions baryum remplacent les ions sulfate ; plus exactement, **2** ions chlorure se substituent à **1** ion sulfate.

Conductivités molaires ioniques de quelques ions :

ions	Ba^{2+}	Cl^{-}	SO_4^{2-}
λ (S.m ² .mol ⁻¹)	127×10^{-4}	$76,3 \times 10^{-4}$	150×10^{-4}

Masses molaires $M_{SO_4^{2-}} = 96,1 \text{ g.mol}^{-1}$
 $M_{BaCl_2} = 208,2 \text{ g.mol}^{-1}$

1. Dosage conductimétrie :

L'eau minérale choisie est l'eau de Contrexéville dont la teneur annoncée en ions sulfate est d'environ 1100 mg.L⁻¹.

Le volume d'eau dosé est $V_0 = 50,0$ mL auxquels sont ajoutés environ 150 mL d'eau distillée.

La solution titrante est une solution de chlorure de baryum.

On désire suivre l'évolution de la conductivité σ de la solution S contenue dans le bécher, au fur et à mesure qu'on ajoute la solution de chlorure de baryum de concentration C.

a. Choix de la solution titrante :

Quelle doit être la concentration C de la solution de chlorure de baryum qui permet de doser l'eau de Contrexéville, sachant qu'on désire avoir un volume équivalent d'environ 10 mL ?

Quelle masse de chlorure de baryum faut-il prélever pour préparer 100 mL de solution titrante ?

Fabriquer la solution titrante

b. Schéma du dosage :

Faire un schéma du dosage en précisant où se situent les solutions départ du dosage.

c. Faire le montage qui permet de réaliser ce suivi en utilisant la cellule conductimétrique à disposition.

Réaliser le dosage en ajoutant la solution titrante millilitre par millilitre.

Tracer simultanément l'évolution de la conductance σ en fonction de V le volume ajouté.

Arrêter le dosage lorsque le volume ajouté est de 20mL

On considère que la variation du volume de la solution S est négligeable au cours du dosage.

a. Interprétation de la courbe obtenue :

Décrire la courbe obtenue (combien de parties : allures des parties)

Remplir le tableau suivant en précisant si la concentration de chaque espèce est nulle (ou quasi nulle), augmente, diminue ou reste constante dans la solution S :

	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
[SO ₄ ²⁻]		
[Ba ²⁺]		
[Cl ⁻]		

D'après le tableau précédent, les valeurs des conductivités ioniques, les données du document et l'équation de la réaction support du dosage, justifier l'évolution de la conductivité avant et après l'équivalence.

b. Détermination du volume de l'équivalence :

En déduire où se situe l'équivalence sur la courbe $\sigma = f(V_B)$. Déterminer graphiquement le volume V_{eq} de l'équivalence.

c. Exploitation du dosage :

Calculer la concentration en ion SO₄²⁻ dans l'eau minérale dosée

Déterminer la masse d'ion sulfate présent dans 1L d'eau minérale. Comparer à la valeur annoncée.

V (mL)	σ ($\infty\Sigma/\chi\mu$)
0	479
1	507
2	493
3	498
4	505
5	509
6	515
7	523
8	531
9	540
10	550
11	568
12	590
13	620
14	650
15	682
16	716
17	745
18	789
19	820
20	858